

swash[®]
simply smile

Toilette corporelle avec Swash[®]

.....



www.swash.eu

Les soins corporels et l'hygiène personnelle sont des rituels importants du quotidien. Pour les patients, la propreté, la fraîcheur et les soins sont indispensables pour bien commencer la journée, surtout sur une prise en charge de longue durée (alitée). Si vous, un membre de votre famille ou un patient a besoin d'aide pour son hygiène personnelle, Swash® propose une toilette corporelle facile, confortable et hygiénique. Dans ce dépliant, vous trouverez plus d'informations concernant la toilette corporelle avec Swash®.



SWASH®, QU'EST-CE QUE C'EST?

La toilette avec Swash® se fait avec l'aide d'un gant de toilette ou d'une lingette imprégnée avec une lotion spéciale. Un paquet Swash® contient 8 gants de toilette ou lingettes, pour un lavage corporel complet. Chaque partie du corps se lave avec un nouveau gant ou une lingette de toilette pour garantir un nettoyage optimal. Si vous le souhaitez, le paquet Swash® peut être chauffé dans un micro-onde, et ainsi s'adapter aux préférences du patient.

POURQUOI NE PAS AVOIR RECOURS A UN BASSIN AVEC DE L'EAU ET DU SAVON?

L'eau et le savon ne sont pas toujours la bonne solution pour la peau. Si vous êtes couché dans un lit, assis sur une chaise ou un fauteuil et que vous avez besoin d'aide pour votre hygiène personnelle, il est difficile de rincer le savon sur votre corps. Les restes de savon sur la peau peuvent provoquer des irritations de la peau et certaines bactéries se développent alors dans ces circonstances. Lors des soins personnels, l'hygiène peut facilement être mise en danger. Le bassin de toilette constitue un risque de contamination, parce qu'il peut contenir des bactéries. En utilisant Swash® le risque de contamination est fortement réduit.



HYGIÈNE ET PEAU

Les gants et les lingettes de toilette doux et résistants de Swash[®] procurent une sensation agréable sur la peau. Après la toilette, la lotion sèche à l'air libre. La lotion douce pour la peau est absorbée. Les produits Swash[®] contiennent de la vitamine E, un antioxydant avec des propriétés bénéfiques pour la peau. Grâce à la toilette avec Swash[®], la peau est mieux hydratée et nourrie.



CONFORT


Beaucoup de patients considèrent la toilette comme un moment épuisant. En particulier, chez les personnes qui ressentent des douleurs, qui ont des problèmes de respiration ou de mobilité. En comparaison avec la toilette à l'aide d'un bassin, contenant de l'eau et du savon, la toilette avec Swash[®] est plus simple et rapide. Pendant la toilette corporelle avec Swash[®], les patients sont moins longtemps dans une position inconfortable et doivent se retourner moins souvent. Parce que Swash[®] réduit le nombre de lavages de quatre à un, les patients trouvent la toilette plus confortable et plus hygiénique. Les conditions de travail du personnel soignant sont aussi améliorées. Ils éprouvent moins de charges physiques lorsqu'ils effectuent les soins quotidiens et disposent de plus de temps pour effectuer un soin de qualité.



COMMENT UTILISER SWASH®?

- Si souhaité, chauffez le paquet Swash® une seule fois seulement avant utilisation, dans le micro-ondes à 800 watts (30 secondes pour les gants de toilette et 20 secondes pour les lingettes de toilette).
- Contrôlez la température des gants/lingettes de toilette du paquet chauffé avant utilisation.
- Utilisez les gants/lingettes de toilette une seule fois et sur une personne.
- Utilisez un gant/une lingette de toilette par partie du corps. La lotion sur la peau sèche à l'air libre.
- Tamponnez la peau des plis profonds avec de la cellulose ou du papier destiné à l'hygiène corporelle pour sécher.
- Notez la date et l'heure sur le paquet.
- Utilisez le paquet Swash® dans les 48 heures après ouverture.

1 GANT DE TOILETTE ... PAR PARTIE DU CORPS ...

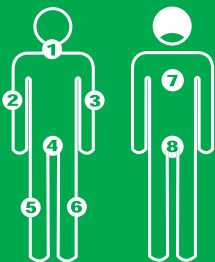

1. Visage, cou et poitrine
2. Bras droit et Aisselle
3. Bras gauche et aisselle
4. Abdomen et parties intimes
5. Jambe droite et pied
6. Jambe gauche et pied
7. Dos
8. Siège